




Regulátor průtoku infuze

- účinnost a přesnost při regulaci průtoku infuze
- jednoduchá a přesná kontrola průtoku gravitační infuze krystaloidních roztoků vč. 10% roztoku glukózy
- nastavitelný průtok infuze od 5 do 250 ml/hod.
- univerzální pro připojení ke všem typům i. v. souprav
- jediný regulátor průtoku na trhu s biokompatibilní vnitřní silikonovou membránou
- injekční port

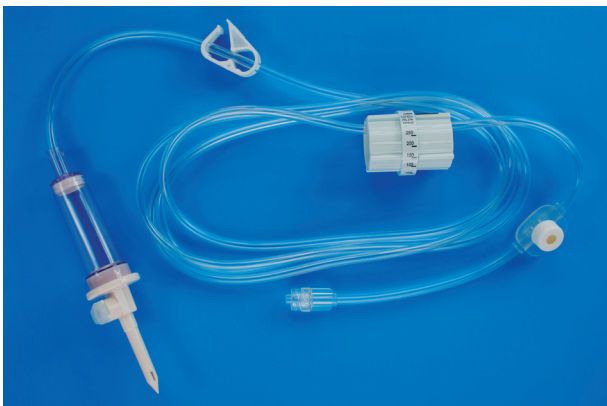

Regulátor průtoku Dosicair je kalibrován pro krystaloidní roztoky – standardně glukóza 5%. Při použití roztoku glukózy větší než 10% a tukových emulzí nelze zaručit úplnou přesnost. Stejně tak nelze použít pro podání krve, krevních derivátů a koloidních roztoků. Je doporučeno použití i. v. katétrů 21 G a menších průměrů – jinak není zaručena přesnost průtoku.

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
DF 100	DOSICAIR – regulátor průtoku	50 ks	400 ks
DF 200	Infuzní set s regulátorem průtoku DOSICAIR – délka 175 cm, mikro kapací komůrka	50 ks	400 ks
DF 300	Infuzní set s regulátorem průtoku DOSICAIR – délka 175 cm, kapací komůrka	50 ks	400 ks